

Askina® Absorb+

Die nichthaftende superabsorbierende Wundauflage



Hohe, langanhaltende Aufnahmekapazität

Hohe Retention (kein Schwamm-Effekt):

- › Kann mit Kompressionstherapie verwendet werden
- › Minimiert das Mazerationsrisiko

Bleibt weich und flexibel, auch wenn gesättigt

Atraumatisch

Hypoallergen, enthält keine Klebstoffe

Askina® Absorb+ ist eine hoch absorbierende Wundauflage, die große Mengen an Wundexsudat und Bakterien aufnehmen und speichern kann. Trotzdem wird mit Askina® Absorb+ ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhalten.

Askina® Absorb+



Vergleichbare Wundauflage



gesättigte Wundauflage

› Weich und flexibel

› Hart, keine Flexibilität

TIPP

- › Askina® Absorb+ kann als primärer Wundverband eingesetzt werden, oder als sekundärer Verband bei sehr starker Exsudation
- › Falls erforderlich, können mehrere Verbände überlappt werden, um sehr große Wundflächen abzudecken
- › Nicht in tiefe Wunden applizieren, da sich die Wundaufgabe ausdehnt

Askina® und Prontosan – ein starkes Team



- › Reduziert schädliche Zelltrümmer und Fibrinbeläge
- › Entfernt Bakterien
- › Reduziert die Geruchsbelastung


Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Traumatische Wunden
- › Chirurgische Wunden
- › Palliative Wunden

Wirkungsschema

Das innere Pad besteht aus 3 Komponenten:

- 1. Zellulosefaser zur gleichmäßigen Verteilung des Wundexsudates
- 2. Superabsorbierende Faser für hohe Aufnahmekapazität und Speicherung
- 3. Bikomponentenfaser für die Bindung und Festigkeit der o.g. Fasern

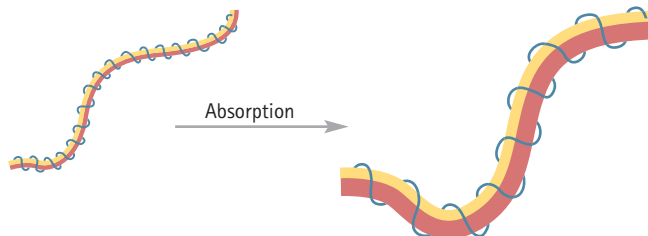

Askina® Absorb+	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	9390451	3331010
	10 cm x 20 cm	10 Stück	9390468	3331210
	20 cm x 20 cm	5 Stück	9390474	3332005