


Curapor®

transparenter Wundverband steril



Curapor® transparenter Wundverband steril

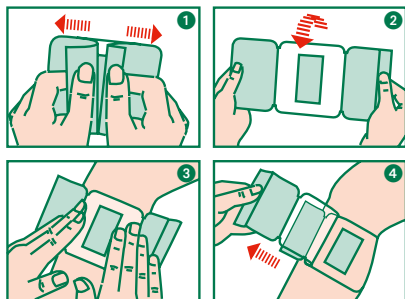

Curapor® steril transparenter Wundverband ist leicht zu applizieren

Anwendungsbereiche

- zur sterilen Versorgung von postoperativen Wunden, Unfallverletzungen sowie kleinen Schnitt- und Schürfwunden
- für die minimalinvasive Chirurgie
- zum Schutz vor Sekundärinfektionen
- als Abdeckung beim Duschen und Schwimmen

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- transparent und wasserdicht
- atmungsaktiv
- bakterienundurchlässig
- beständig gegen gängige Desinfektionsmittel
- haftet sicher und passgenau
- lässt sich schmerzarm und rückstandsfrei entfernen
- verringertes Verklebungsrisiko mit der Wunde
- auch für empfindliche Haut gut geeignet

Produktzusammensetzung

Trägerfolie: 100 % Polyurethan; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei); Wundkissen: Saugschicht aus Viskose/Polyester, Polyester/ Polyethylen-Wundkontaktschicht

Ausführung:

* Die Größen 7 x 5 cm und 10 x 8 cm haben abgerundete Ecken

- 1 Einfach das Abdeckpapier aufschlagen und auseinanderziehen ...
- 2 ... Produkt umdrehen ...
- 3 ... sanft an der gereinigten Haut andrücken ...
- 4 ... und die Stützfolie abziehen – fertig!

Curapor® transparenter Wundverband steril
einzeln steril eingeschiegelt

Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
7 x 5*	4 x 2,5	13 099	291 312 4	5 / 120	SSB, EV
10 x 8*	6 x 4	13 100	291 355 5	5 / 170	SSB, EV
7 x 5*	4 x 2,5	13 101	291 373 3	50 / 500	SSB, EV
10 x 8*	6 x 4	13 102	291 375 6	25 / 200	SSB, EV
10 x 15	5 x 11	13 103	291 409 8	25 / 225	SSB, EV
10 x 20	5 x 16	13 104	291 417 0	25 / 225	SSB, EV
10 x 25	5 x 20	13 105	291 418 7	25 / 225	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15